



The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search

<http://ageconsearch.umn.edu>

aesearch@umn.edu

*Papers downloaded from **AgEcon Search** may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.*

No endorsement of AgEcon Search or its fundraising activities by the author(s) of the following work or their employer(s) is intended or implied.



Metrología Química II: Estimación de la Incertidumbre en la Medición de pH en Aguas

Marco Delgado, Manuel Vanegas y Gustavo Delgado*.

Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Química, Laboratorio de Análisis de Trazas de Metales Pesados (LATMP), Edificio de Ciencias Básicas, León, Nicaragua. Tel: 505 311 5013, ext: 1132. Fax: 505 311 4012. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-LEÓN).

RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo es estimar la incertidumbre en la determinación del pH en una muestra de agua tomando en cuenta todos los parámetros experimentales que intervienen en el proceso de medición. Para evaluar la incertidumbre se siguió el procedimiento general establecido en la guía GUM ISO 1995. Se derivó el modelo matemático, donde interviene el efecto del potencial de asimetría del electrodo de vidrio utilizado. Se identificaron todas las fuentes de incertidumbres a través del diagrama causa-efecto. Se calcularon todos los componentes de las incertidumbres y se combinaron a través de la ley de propagación de la incertidumbre para obtener el valor de la incertidumbre estándar en la medición del pH en la muestra de agua (u_{pHx}). Se elaboró un diagrama de Pareto, donde se demuestra que de 7 fuentes principales de incertidumbre, solamente la repetibilidad en la lectura del potencial (E_x) de la muestra y la incertidumbre en el cálculo del pH donde el potencial es nulo (pH_0) son los que influyen en la estimación de u_{pHx} , cuyo valor fue 0.05. El intervalo de confianza encontrado fue de 7.6 ± 0.11 . La incertidumbre expandida fue calculada tomando como factor de cobertura el valor de t al 95% de nivel de confianza y 18 grados de libertad efectivos.

Palabras claves: Metrología química; Incertidumbre en la medición de pH en aguas; Incertidumbre expandida relativa en la medición de pH; Potencial de asimetría.

1. INTRODUCCIÓN

En la primera parte sobre la metrología química^[1] se estableció una metodología confiable para la calibración del sistema potenciométrico (pHmetro-electrodo) en las mediciones de pH. Se evaluó la repetibilidad y se elaboraron las cartas de control para establecer los límites de control en las mediciones rutinarias de pH. Son muchas las aplicaciones de este método potenciométrico para medir la acidez o basicidad en diferentes tipos de muestras, especialmente en análisis de agua residual y de consumo humano^[2-4].

Los intercambios comerciales exigen la certificación de la calidad de los productos siguiendo normas internacionales^[5,6]. Las especificaciones de los productos deben reflejar la calidad de los resultados de la medición, lo que implica la exactitud y su grado de dispersión o incertidumbre asociada^[7]. La metrología química desempeña un papel muy importante en el cálculo de las incertidumbres^[8,9]. En las aguas de consumo humano es muy importante especificar el pH. Los certificados de este producto embotellado deben especificar su valor y la incertidumbre asociada.

Existen trabajos de investigación relacionados con la estimación de la incertidumbre^[10] y la trazabilidad^[11] en las mediciones de pH. La mayoría de los resultados de los ensayos de aptitud o estudios de ínter comparación en estas mediciones arrojan grandes sesgos y muy poca precisión.

Por lo tanto, se hace necesario implementar un procedimiento normalizado para la calibración^[1] y la evaluación de la incertidumbre en las mediciones de pH.

Existen diferentes guías generales^[12-14] que establecen las diferentes etapas para estimar la incertidumbre en las mediciones analíticas. Los procedimientos contemplan la derivación del modelo matemático, la cuantificación de los diferentes componentes de la incertidumbre, su combinación y la evaluación de la incertidumbre expandida.

El presente trabajo pretende establecer una metodología rigurosa para estimar la incertidumbre en la medición del pH en una muestra de agua, basado en la guía GUM ISO 1995^[12] para su expresión cuantitativa.

2. TEORIA

Principio de la medición del pH

El pH fue definido por Sorensen y Linderstrom-Lang en 1924 como el logaritmo negativo de la actividad del protón hidratado:

$$pH = -\log a_H \quad (1)$$

El electrodo primario para medir el pH, es el de hidrógeno tomando como referencia un electrodo de plata-cloruro de plata.

* Autor para correspondencia: gusdel53@yahoo.es

Este sistema sólo lo tienen los laboratorios de referencia nacionales, como el NIST en los Estados Unidos de América o el CENAM de México. Son los que fabrican soluciones de referencia primarias certificadas para pH con una incertidumbre de hasta 0.0005 unidades de pH^[15]. Los laboratorios de ensayos utilizan materiales de referencia terciarios certificados trazables con NIST para calibrar el sistema potenciométrico, disponiendo de electrodos de vidrio comerciales.

Para medir el pH de una solución muestra con un electrodo de vidrio combinado con uno de plata-cloruro de plata como referencia, utilizando una solución de referencia certificada trazable con NIST (pH_B, 7.00), se miden los potenciales de celda respectivos (E_x y E_B) a una temperatura dada y se calcula su pHx según el modelo de la ecuación (2) denominado pH operacional^[16,17].

$$pH_x = pH_B + \frac{(E_B - E_x)F}{2.303RT} \quad (2)$$

Donde R y F son las constantes de los gases y de Faraday con valores correspondientes a 8.31441 J mol⁻¹K⁻¹ y 96484.56 Cmol⁻¹^[18]. T es la temperatura termodinámica. El potencial E_B es diferente de 0.000 V, debido a la existencia del potencial de asimetría provocado por las imperfecciones en la fabricación de las membranas de vidrio. Las mediciones de pH con dos o más soluciones de referencia tienen mayor precisión y exactitud^[10,11].

Estos modelos toman en cuenta la pendiente experimental y el coeficiente de variación de la pendiente como función de la temperatura. La medición de pH se realiza comúnmente utilizando electrodos de vidrio combinados comerciales de muy variada calidad^[19].

Estos electrodos se caracterizan por tener membranas de vidrio con capacidad de realizar mediciones en una amplia gama de pH que puede oscilar entre 1 y 13. Fuera de este intervalo, los electrodos presentan respuestas erróneas. A pH menores que la unidad, la elevada concentración de protones hidratados bloquean los sitios activos y se tienen respuestas con errores negativos^[2].

Mientras que, a pH mayores que 13 los electrodos responden a iones alcalinos y se tienen errores positivos, debido a que el coeficiente de selectividad por el ion alcalino es grande^[2,19-20]. Electrodo con membranas de vidrio de mala calidad pueden responder a una estrecha gama de pH que puede oscilar entre 2 y 9. No obstante, dependiendo del alcance de las mediciones en el laboratorio, se podrá seleccionar el electrodo según se describe en el procedimiento del método normalizado.

Procedimiento general para la estimación de la incertidumbre

En cualquiera de los casos, se hace necesaria la evaluación de la incertidumbre en las mediciones de pH, previa calibración del sistema potenciométrico tal a como se estableció anteriormente^[1]. El procedimiento general para estimar la incertidumbre se presenta en la figura 1, de acuerdo a las directrices existentes para la estimación de la incertidumbre^[12-14].

En primer lugar se deriva el modelo matemático, se identifican las fuentes de incertidumbres (las de tipo A, obtenidas a partir de una serie de observaciones y

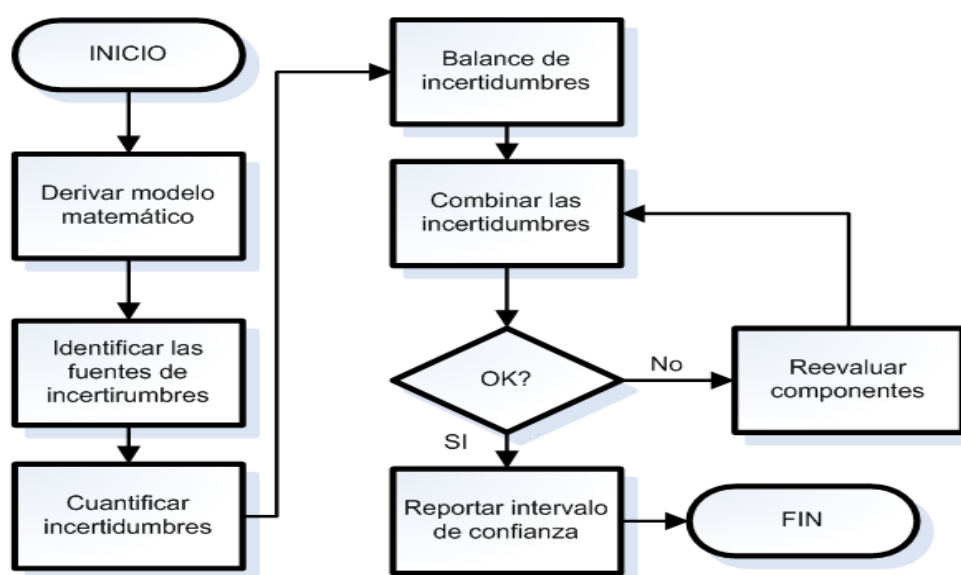


Figura 1: Diagrama de flujo representando el procedimiento para la estimación de la incertidumbre en la medición del pH.

las de tipo B, obtenidas a partir de las distribuciones normal, rectangular o triangular), se cuantifican las incertidumbres, se hace un balance de las incertidumbres, se combinan las incertidumbres a través de la ley de la propagación de la incertidumbre, se revisa si no hay incongruencias para reevaluar los componentes de la incertidumbre, se calcula el intervalo de confianza especificando el factor de cobertura y finalmente se reportan los resultados con el número de cifras significativas correcto.

En el presente trabajo, se pretende aplicar este procedimiento para evaluar la incertidumbre en la medición de pH en una muestra de agua, derivando un modelo matemático que toma en cuenta el potencial de asimetría experimental del electrodo de vidrio.

3. PARTE EXPERIMENTAL

Materiales

Durante el proceso de calibración a 25 y 35 °C, se utilizaron soluciones de referencia de pH 4.00, 7.00 y 10.00 certificadas trazables con NIST, un pH-metro TACUSSEL LPH 230T (resolución 1 mV, precisión ± 1 mV, drift < 3 mV/12h, ajuste de temperatura con resolución de 0.1 °C), un baño termostático Vidra FOC BT-9, una unidad refrigerante marca Vidra FOC UR-1, un termómetro digital TESTO 925 con resolución de 0.1 °C y precisión ± 0.1 °C, un electrodo de vidrio combinado con el de referencia plata-cloruro de plata marca TACUSSEL (± 0.02 pH).

Calibraciones a 25 y 35 °C y lectura del potencial de la muestra de agua

El instrumental potenciométrico se calibró, de acuerdo, al procedimiento establecido en nuestro laboratorio en un trabajo anterior^[1]. Se sumergió el electrodo de vidrio combinado en la solución de referencia de pH 7.00 termostatzada a 25°C con una precisión de ± 0.1 °C, y se realizó la lectura en mV.

Luego, se introdujo el electrodo en las soluciones de referencias de pH 4.00 y 10.00 y se realizaron las lecturas correspondientes en mV. Se hicieron 5 lecturas en milivoltios para cada valor de pH. Este mismo procedimiento se utilizó para el proceso de calibración a 35°C. Se midió la temperatura a la muestra con una precisión de ± 0.1 °C y se introdujo el electrodo de vidrio, efectuándose 9 lecturas de potencial en milivoltios.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Deducción del modelo

En la ecuación (2) se definió el pH operacional como el modelo básico para medir el pH de una solución problema (pH_x). Si E_B y E_x se miden en mV, se puede designar la constante $A=2303$ (R/F). En estas condiciones la ecuación (2) se puede escribir como (3).

$$pH_x = pH_B + \frac{(E_B - E_x)}{AT} \quad (3)$$

El pH_B (7.00) debe corresponder teóricamente al pH donde el potencial E_B es 0 mV y no depende de la temperatura. No obstante, ningún electrodo cumple con estas condiciones debido a las imperfecciones de la membrana de vidrio durante su fabricación, estableciéndose un potencial de asimetría que equivale a la diferencia de potencial entre el pH a 0.000 V (pH_0 a la temperatura de calibración, 25°C) y el pH en el punto donde el potencial es independiente de la temperatura denominado isopotencial (pH_{iso})^[2]. En estas condiciones, la ecuación (3) se puede expresar como:

$$pH_x = pH_{iso} + \frac{AT_{25}(pH_0 - pH_{iso}) - E_x}{AT_{25}} \quad (4)$$

Si se considera la corrección de la pendiente P_{25} (relación entre la pendiente práctica con respecto a la teórica a 25°C) y el factor de corrección de la temperatura debido a la diferencia de temperatura entre la solución de referencia (T_{25}) y la muestra (T_x), se tiene el modelo matemático buscado, ecuación (5).

$$pH_x = pH_{iso} + \frac{P_{25} AT_{25}(pH_0 - pH_{iso}) - E_x}{P_{25} AT_x} \quad (5)$$

Identificación de los componentes de la incertidumbre

Existen 7 componentes principales que influyen en la incertidumbre en pH_x : el potencial E_x de la celda medido en la muestra de agua, el pH isopotencial donde no depende de la temperatura, el pH de calibración donde el potencial de la celda es nulo a 25 °C, la temperatura medida en la muestra, la temperatura de calibración (25°C), la constante A como función de las incertidumbres en los valores de R y F , el factor de corrección de la pendiente a 25°C.

Cada uno de estos componentes principales tiene otras fuentes de incertidumbre, los cuales se detallan en el diagrama causa-efecto^[13] que se presenta en la figura 2.

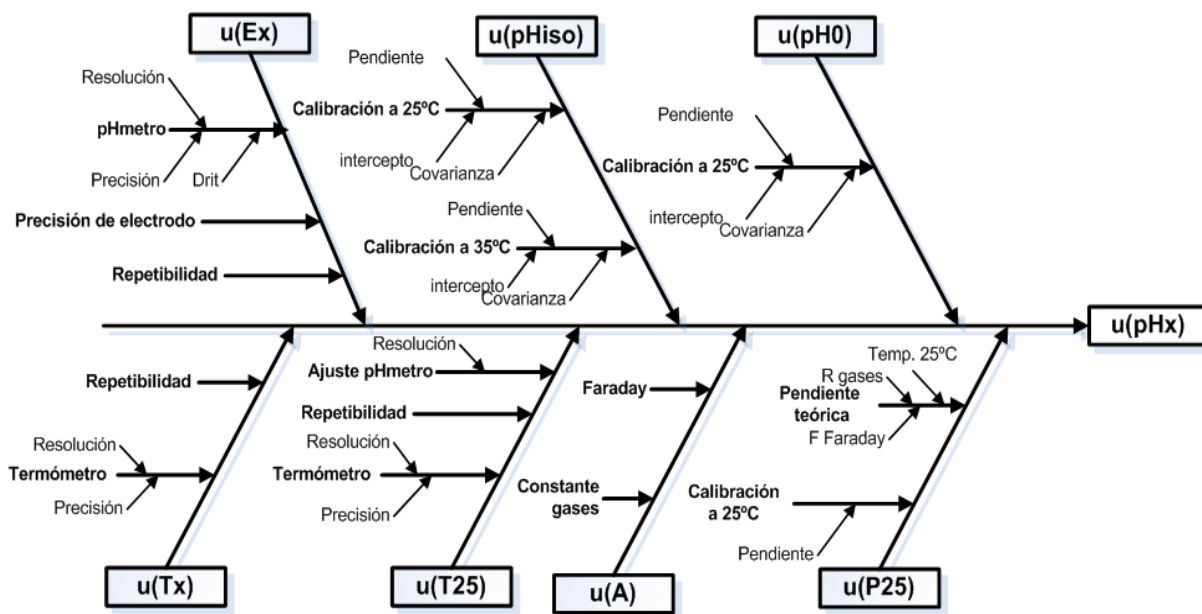


Figura 2. Diagrama causa-efecto para los componentes de la incertidumbre en la medición del pH en una muestra de agua.

Cuantificación de los componentes de la incertidumbre

Cálculo de la incertidumbre del pH_{iso}

Tal a como se afirmó anteriormente, el pH_{iso} es el valor de pH donde el potencial es independiente de la temperatura. Es el eje de rotación o centro de gravedad de la recta que representa el potencial de la celda como función del pH . Para evaluarlo fue necesario medir el potencial de tres soluciones de referencia (pH : 4.00, 7.00 y 10.00 trazables con NIST) a dos diferentes temperaturas (25°C y 35°C para el presente estudio) y luego se aplicó un análisis de regresión lineal con el fin de obtener las rectas y evaluar su intersección a través de la ecuación (6). Los resultados se presentan en las tablas 1 y 2; la intersección de las dos rectas se puede ver en la figura 3.

TABLA 1. Valores de potencial (E_i) en mV a diferentes pH de soluciones de referencia medidos en réplicas de 5 a 25 y 35 °C

$T/^{\circ}C$	pH	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5
25	4	166	168	168	168	167
	7	-7	-6	-6	-7	-6
	10	-182	-180	-180	-183	-182
35	4	178	178	179	179	177
	7	-3	-3	-2	-3	-2
	10	-190	-188	-187	-188	-188

$$pH_{iso} = \frac{{}^{25}b_0 - {}^{35}b_0}{{}^{35}b_1 - {}^{25}b_1} \quad (6)$$

El valor de pH_{iso} es 8.92, calculado a partir de la ecuación (6), la cual fue obtenida por la igualdad de los dos modelos de calibración (a 25 y 35 °C) y el potencial en este punto es -119 mV. Este valor de potencial corresponde al potencial de asimetría del electrodo utilizado en este estudio. Para calcular la incertidumbre en pH_{iso} , se aplicó la ley de propagación de la incertidumbre^[12] de acuerdo a la ecuación (7).

Es importante remarcar que los coeficientes del modelo de regresión (b_0 y b_1) son parámetros correlacionados^[23], por tanto se debe calcular la covarianza, la cual está representada en el segundo término de la ecuación (7). En anexo se puede ver la derivación de esta ecuación.

$$upH_{iso} = \sqrt{\sum c_{bi}^2 u_{bi}^2 + 2 \sum \sum c_{bi} c_{bj} u_{bi} u_{bj} r(b_i, b_j)} \quad (7)$$

Donde c_{bi} son los coeficientes de sensibilidad para los interceptos ($i=0$) y las pendientes ($i=1$) a 25 y 35°C calculadas a partir de las derivadas parciales de pH_{iso} con respecto a b_i , $c_{bi} = \partial pH_{iso} / \partial b_i$; en el segundo término, c_{bi} y c_{bj} son los coeficientes de sensibilidad de los interceptos ($i=0$) y las pendientes ($j=1$) a 25 y 35 °C; u_{bi} son las incertidumbres de los interceptos y las pendientes calculadas por $S_{bi}/\sqrt{15}$; $r(b_i, b_j)$ es el coeficiente de correlación entre b_0 y b_1 a 25 y 35 °C. Los datos necesarios para el cálculo de upH_{iso} se encuentran en la tabla N° 3.

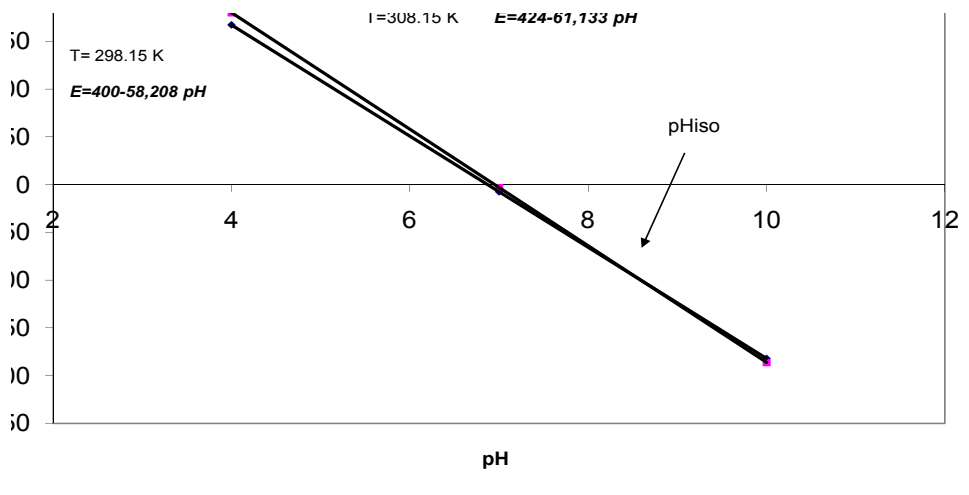


Figura 3. Modelos de calibración de potencial en función del pH a 25 y 35 °C. El valor de pH_{iso} es de 8.92.

TABLA 2. Resultados del análisis de regresión lineal a 25 y 35 °C

T/°C	Pendiente b_1	S_{b1}	Intercepto b_0	S_{b0}	r^2
25	-58.208	0.15146	400	1.0007	0.9999
35	-60.898	0.18691	422	1.4315	0.9999

TABLA 3. Datos para el cálculo (*) de upH_{iso}.

Parámetro	b_i	u_{bi}	c_{bi}	$(c_{bi} * u_{bi})^2$
$^{25}b_0$	400	0.25837962890	-0.3717472119	0.00922596878
$^{25}b_1$	-58.208	0.03910680383	-3.3167037490	0.01682356418
$^{35}b_1$	424	0.36961171060	0.3717472190	0.01887934340
$^{35}b_0$	-60.898	0.04825995449	3.3167037490	0.02562047514
$^{25}r(b_0, b_1)$	-0.9613			
$^{35}r(b_0, b_1)$	-0.9621			

(*) Para una mayor precisión los cálculos fueron realizados con el programa de cálculo formal MAPLE 11.

Si se sustituyen estos datos en la ecuación (7), se tiene la estimación de la incertidumbre de pH_{iso}:

$$upH_{iso} = \sqrt{\frac{0.00922596878 + 0.01682356418 + 0.01887934 + 0.02562047514 + 2(-0.3717472119)(-3.316703749)(0.2583796289)(0.03910680383)(-0.9613) + 2(0.3717472119)(3.316703749)(0.3696117106)(0.04825995449)(-0.9621)}{2}} = 0.0654$$

Los grados de libertad se pueden calcular a partir del conjunto de 15 mediciones efectuadas para estimar los dos modelos regresión: $\nu_{pH_{iso}} = 2(n_1 - 2) = 26$.

Cálculo de la incertidumbre de pH₀ a la temperatura de calibración 25°C

El valor de pH cuando el potencial es 0.000 V (pH₀) se obtiene a partir del modelo de calibración a 25°C ($E=400 - 58.208 \text{ pH}$). Los coeficientes del modelo se encuentran en la tabla 2 y la expresión matemática para el cálculo de pH₀ es la siguiente:

$$pH_0 = \frac{b_0}{b_1} = 6.87 \quad (8)$$

Para calcular la incertidumbre de pH₀ se aplica la ley de propagación de la incertidumbre a la ecuación (8). La expresión para calcular la incertidumbre de pH₀ se representa en la ecuación (9).

$$upH_0 = \sqrt{c_{b0}^2 u_{b0}^2 + c_{b1}^2 u_{b1}^2 + 2c_{b0} c_{b1} u_{b0} u_{b1} r(b_0, b_1)} \quad (9)$$

Tomando los datos necesarios en la tabla N° 3 e introduciéndolos en la ecuación anterior se tiene el valor de la incertidumbre en pH₀.

$$u_{pH_0} = 0.0458$$

Los grados de libertad se obtienen a partir de las 15 mediciones realizadas para estimar el modelo de regresión: $\nu = n - 2 = 13$

Cálculo de la incertidumbre de A

La expresión matemática de A en mV pH⁻¹ K⁻¹ es la siguiente:

$$A = 2303 \frac{R}{F} \quad (10)$$

Admitiendo que las variables R y F no están correlacionadas y aplicando la ley de la propagación de la incertidumbre se tiene la ecuación (11).

$$uA = \sqrt{c_R^2 u_R^2 + c_F^2 u_F^2} \quad (11)$$

Los valores de R y F son 8.31441 J mol⁻¹ K⁻¹ y 96484.56 Cmol⁻¹. Considerando 10 mediciones, las incertidumbres estándares de R y F son $u_R = 0.00026/\sqrt{10}$

y $u_F = 0.52/\sqrt{10}$ [18]. Los coeficientes de sensibilidad calculados por la derivada parcial de la función A con respecto a R y F son: $c_R = 0.0239$ y $c_F = -0.000206$. Sustituyendo los datos en (10) y (11) se tienen el valor de A y su incertidumbre.

$$A = 0.198444 \text{ mVpH}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$u_A = 0.000199$$

Los grados de libertad en la estimación de la incertidumbre de A se calculan a partir de las dos series de 10 mediciones en R y F: $\nu = 2(n-1) = 18$

Incertidumbre en la temperatura de calibración T_{25}

La incertidumbre en la temperatura de calibración a 25 °C (u_{T25}) tiene dos componentes: la incertidumbre del termómetro y la del ajuste de la temperatura en el pHmetro. El detalle de los cálculos de u_{T25} se encuentran en la tabla N°4. Los grados de libertad efectivos (ν_{ef}) calculados según la ecuación (7) tienen un valor de 140.

TABLA 4. Componentes de la incertidumbre de la temperatura de calibración a 25 °C T_{25}

Instrumento	Fuente	Especificación (a) en °C(°)	Distribución	Fórmula y grados de libertad (ν)	u_i
Termómetro	Resolución	0.1	Rectangular	$u_{R1} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$ $\nu = \infty$	0.0288
	Incertidumbre según fabricante	± 0.1	Normal	$u_f = \frac{a}{1.96}$ $\nu = 50$	0.051
	Repetibilidad (S_i)	0.07 (**)	t Student	$u_r = \frac{S_f}{\sqrt{n}}$ $\nu = 9$	0.02134
pHmetro	Resolución	0.1	Rectangular	$u_{R2} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$ $\nu = \infty$	0.0288
$u_{T25} = [(0.0288)^2 + (0.051)^2 + (0.02134)^2 + (0.0288)^2]^{1/2} = 0.06867 \text{ K}$					

(*) Las especificaciones son obtenidas de los catálogos del termómetro y del pHmetro. (**) Valor obtenido a partir de una serie de 10 mediciones. El promedio de T_{25} es 298.02 K.

Cálculo de la incertidumbre de P_{25}

El factor de corrección de la pendiente a 25 °C está dado por la ecuación (12). Es la relación entre la pendiente experimental (b_{lexp}), obtenida a partir del modelo de calibración del potencial medido para los valores de pH de las soluciones de referencias certificadas, y la pendiente teórica ($AT_{25} = 59.16 \text{ mV}$).

$$P_{25} = \frac{b_{\text{lexp}}}{AT_{25}} \quad (12)$$

Dada que, las dos pendientes son variables independientes, la incertidumbre en P_{25} se calcula, según la siguiente ecuación:

$$uP_{25} = \sqrt{c_{b_{\text{lexp}}}^2 u_{b_{\text{lexp}}}^2 + c_A^2 u_A^2 + c_{T25}^2 u_{T25}^2} \quad (13)$$

Los coeficientes de sensibilidad $c_{b_{\text{lexp}}}$, c_A y c_{T25} son 0.016909, -4.959753, y -0.00330. Las incertidumbres estándares $u_{b_{\text{lexp}}}$, u_A y u_{T25} tienen valores de 0.03911, 0.000199 y 0.06867 respectivamente. La incertidumbre de b_{lexp} se obtiene a partir de la desviación estándar de la recta de calibración a 25°C (ver tabla 2) para 15 mediciones. Sustituyendo estos datos en (13) se tiene la incertidumbre en P_{25} , cuyo valor es el siguiente:

$$u_{P25} = 0.00187$$

El valor de P_{25} es:

$$P_{25} = 58.208 / (0.198444 \times 298.02) = 0.9842$$

Los grados de libertad obtenidos a partir de la ecuación (17) tienen un valor de 31 grados de libertad efectivos.

Cálculo de la incertidumbre de la temperatura medida en una muestra de agua u_{Tx}

Las fuentes que afectan la incertidumbre en la medición de la temperatura en la muestra de agua son tres: la debida a la resolución de la lectura del instrumento, la de la precisión especificada por el fabricante en el catálogo del termómetro [25] y la debida a la repetibilidad. Las dos primeras se encuentran en la tabla 4 (0.0288 y 0.051 respectivamente).

La incertidumbre de repetibilidad se obtuvo a partir de la desviación estándar de 10 mediciones de la temperatura en la muestra de agua: t °C: 28.1, 27.8, 27.9, 27.8, 27.9, 28.0, 28.0, 27.9, 27.8, 28.0.

El promedio y la desviación estándar en °C son 27.92 y 0.103 respectivamente. El valor de la incertidumbre estándar de repetibilidad es $0.103/\sqrt{10}$, igual a 0.0326. Por tanto la incertidumbre de la medición de la temperatura en la muestra de agua y el valor de T_x en unidades K son:

$$u_{Tx} = \sqrt{(0.02882 + 0.0512 + 0.03262)} = 0.0670 \text{ K}$$

$$T_x = 273.15 + 27.9 = 301.07 \text{ K}$$

Los grados de libertad efectivos en la medición de u_{Tx} son 77.

Cálculo de la incertidumbre en la medición del potencial en una muestra de agua u_{Ex}

La incertidumbre en la medición del potencial de la muestra de agua E_x , tiene dos componentes, la del

instrumento potenciométrico (pHmetro + electrodo) y la de repetibilidad. En la tabla 5, se presenta el cálculo de los diferentes componentes de la incertidumbre en el potencial E_x . La resolución del pHmetro y la incertidumbre expandida reportada por el fabricante son de 1 mV y ± 1 mV respectivamente.

TABLA No 5. Datos y cálculos para la evaluación de la incertidumbre de u_{Ex}

Instrumento	Fuente	Especificación (a)	Distribución	Fórmula y grados de libertad	u_i
pHmetro	Resolución	1 mV	Rectangular	$u_R = \frac{a}{2\sqrt{3}}$ $v = \infty$	0.289
	Precisión	± 1 mV	Normal	$u_r = \frac{a}{1.96}$ $v = 50$	0.510
	Drift en 12h	< 3 mV	Rectangular	$u_D = \frac{a}{2\sqrt{3}}$ $v = \infty$	0.866
Electrodo	Incertidumbre del electrodo	± 1 mV	Normal	$u_{el} = \frac{a}{1.96}$ $v = 50$	0.510
	Desviación estándar de repetibilidad (S_r)	1.986 mV (*)	t de Student	$u_r = \frac{S_r}{\sqrt{9}}$ $v = 8$	0.662

(*) Obtenido a partir de 9 mediciones de potencial en mV de la muestra de agua: E_{xi} : -46, -41, -42, -42, -40, -43, -41, -39, -42.

El Drift o variación del potencial en 12h es < 3 mV^[2]. El electrodo presenta una incertidumbre de ± 1 mV. La incertidumbre debido a la repetibilidad se obtiene a partir de 10 mediciones de potencial a la muestra de agua. La incertidumbre u_{Ex} se calcula según la ecuación (14).

$$u_{Ex} = \sqrt{\sum u_i^2} \quad (14)$$

Sustituyendo los valores de u_i de la tabla 5, se tiene:

$$u_{Ex} = 1.339 \text{ mV}$$

Los grados de libertad efectivos tienen un valor estimado en 120. El potencial promedio medido en la muestra de agua es:

$$E_x = -41.77 \text{ mV}$$

TABLA No 6. Balance de la incertidumbre en la medición del pH en una muestra de agua.

Parámetro (x_i)	Valor de (x_i)	μ_{xi}	c_{xi}	$(c_{xi} \mu_{xi})^2$	Ind%
pH_{iso}	8.92	0.0654	0.01013	4.3896×10^{-6}	0.2
pH_0	6.87	0.0458	0.98989	0.002055	79.6
P_{25}	0.9842	0.00187	-0.72176	1.822×10^{-6}	0.1
T_{25} en K	298.02	0.06867	-0.006809	2.186×10^{-7}	0.0
T_x en K	301.07	0.0670	0.00438	8.614×10^{-8}	0.0
A en $mVK^{-1}pH^{-1}$	0.198444	0.000199	-3.5796	5.074×10^{-7}	0.0
E_x en mV	-41.77	1.339	-0.017006	5.185×10^{-4}	20.1
Suma=				0.00258	100

Balance de las incertidumbres

En la tabla 6, se resumen todos los parámetros que intervienen en la evaluación de la incertidumbre de pH_x. En esta tabla se muestran las variables (x_i) del modelo matemático de la ecuación (5), el valor correspondiente, las incertidumbres (u_{xi}), los coeficientes de sensibilidad de cada variable (c_{xi}) calculados a partir de la derivada parcial de pH_x con respecto a x_i ($c_{xi} = \frac{\partial pH_x}{\partial x_i}$), el producto de c_{xi} y u_{xi} , y el índice de contribución (Ind%) calculado a partir de la ecuación (15).

$$Ind\% = \frac{(c_{xi} u_{xi})^2}{\sum (c_{xi} u_{xi})^2} (100) \quad (15)$$

Si se realiza un diagrama de barra para Ind% en función de los parámetros y las sumas acumuladas se obtiene el Diagrama de Pareto^[22].

La figura 4, representa este diagrama, donde se puede observar que los parámetros pH₀ y Ex son los que mayormente contribuyen (más del 90%) a la incertidumbre en la medición de pH en la muestra de agua.

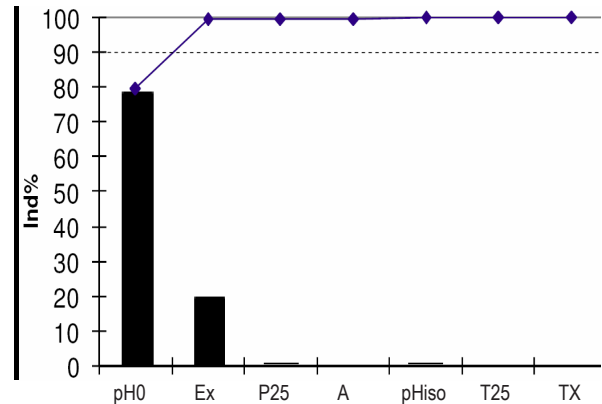


Figura 4. Diagrama de Pareto para las contribuciones de las incertidumbres en upH_x .

Si se asume, que la influencia es considerable tomando como referencia el 90%, se puede ver que, basta tomar en cuenta solamente los componentes de las incertidumbres del pH_0 y E_x para estimar la incertidumbre total de pH_x .

Estimación de la incertidumbre combinada en la medición de pH en la muestra de agua u_{pH_x}

Aplicando la ley de propagación de la incertidumbre al modelo matemático representado en la ecuación (5), se tiene la ecuación (16).

$$upH_x = \sqrt{c_{pH_{iso}}^2 u_{pH_{iso}}^2 + c_{pH_0}^2 u_{pH_0}^2 + c_{P_{25}}^2 u_{P_{25}}^2 + c_A^2 u_A^2 + c_{T_{25}}^2 u_{T_{25}}^2 + c_{T_x}^2 u_{T_x}^2 + c_{E_x}^2 u_{E_x}^2} \quad (16)$$

Si sustituimos los datos de la quinta columna de la tabla N° 6 en la ecuación anterior, se tiene el valor de la incertidumbre combinada de la medición de pH en la muestra de agua.

$$u_{pH_x} = 0.05$$

Este mismo resultado se obtiene, si se sustituyen en la ecuación (16) solamente los términos correspondientes a los parámetros E_x y pH_0 .

Estimación del intervalo de confianza

Para evaluar la incertidumbre expandida, es necesario seleccionar el factor de cobertura k . Este factor puede ser seleccionado de acuerdo al tipo de distribución. Así, para una distribución normal y el 95.5% de nivel de confianza $k=2$; para una distribución t se pueden seleccionar dos valores: $k = t_{0.975, v}$ o $t_{0.975, v/\sqrt{n}}$.

Generalmente, cuando se reporta la incertidumbre expandida, se selecciona el valor de 2 asumiendo que los resultados siguen una distribución normal al 95.5% de nivel de confianza. No obstante, cualquier valor de k seleccionado se debe declarar cuando se reportan las incertidumbres expandidas.

Una forma rigurosa de seleccionar k es evaluando los grados de libertad efectivos (v_{ef}) según la ecuación (17) [9,12]. Si este valor es mayor o igual a 30 se selecciona el factor $k=2$; si es menor de 30, k debe seleccionarse de acuerdo a la distribución t .

$$v_{ef} = \frac{u_{pH_x}^4}{\sum \frac{c_i^4 u_{xi}^4}{v_i}} \quad (17)$$

Los datos necesarios para calcular v_{ef} se encuentran en la tabla 7. En esta tabla se encuentran los grados de libertad intermediarios v_i para cada uno de los componentes de la incertidumbre que ya fueron evaluados anteriormente. Al dividir la incertidumbre de

pH_x elevada a la cuarta potencia (upH_x^4) entre la suma de la última columna de la tabla anterior se obtienen los grados de libertad efectivos. El valor calculado de esta manera es el siguiente: $v_{ef}=18$

TABLA 7. Datos para el cálculo de los grados de libertad efectivos v_{ef}

x_i	u_{xi}	v_i	$c_{xi}^4 u_{xi}^4$	$c_{xi}^4 u_{xi}^4 / v_i$
pH_{iso}	0.0654	26	1.92×10^{-13}	7.39×10^{-15}
pH_0	0.0458	13	4.22×10^{-6}	3.25×10^{-7}
T_x	0.067	77	7.47×10^{-15}	9.70×10^{-17}
P_{25}	0.00187	31	3.3185×10^{-12}	1.07×10^{-13}
E_x	1.339	120	2.70×10^{-14}	2.25×10^{-9}
T_{25}	0.06867	140	4.80×10^{-14}	3.43×10^{-16}
A	0.000199	18	5.07×10^{-7}	2.82×10^{-8}
Suma=				3.55×10^{-7}

Para evaluar la incertidumbre expandida el factor k es el valor de t de las tablas de distribución t a dos colas y al 95% de nivel de confianza. Este valor es 2.101. La incertidumbre expandida se expresa de la siguiente manera:

$$U = t_{0.975, 18} upH_x = 2.101 \times 0.05 = 0.11$$

El intervalo de confianza del pH medido en la muestra de agua es:

$$pH_x \pm U = 7.60 \pm 0.11 \quad (18)$$

La precisión en la medición del pH en la muestra de agua, puede evaluarse como la incertidumbre expandida relativa al pH_x expresada en porcentaje (UER%). En la práctica, dependiendo de la calidad del electrodo y de la precisión del pHmetro, se pueden tener valores de incertidumbres expandidas de hasta 0.1 tomando un factor de cobertura $k=2$.

Si se grafica UER% en la gama de pH entre 2 y 11 para 0.5% y 1%, se observa que, las incertidumbres disminuyen cuando aumenta el valor de pH. En la figura 5, se observa este fenómeno. En el presente estudio el valor de UER% es de ± 1.41 %. Estos puntos se observan en la gráfica y puede verse que están en los límites aceptables.

Si se mide directamente el pH_x de la muestra cuya temperatura promedio fue evaluada anteriormente (27.9°C) se tienen los siguientes resultados: 7.79, 7.71, 7.71, 7.72, 7.68, 7.73, 7.71, 7.66, 7.71. Con un valor promedio de 7.71 y una desviación estándar igual a 0.03.

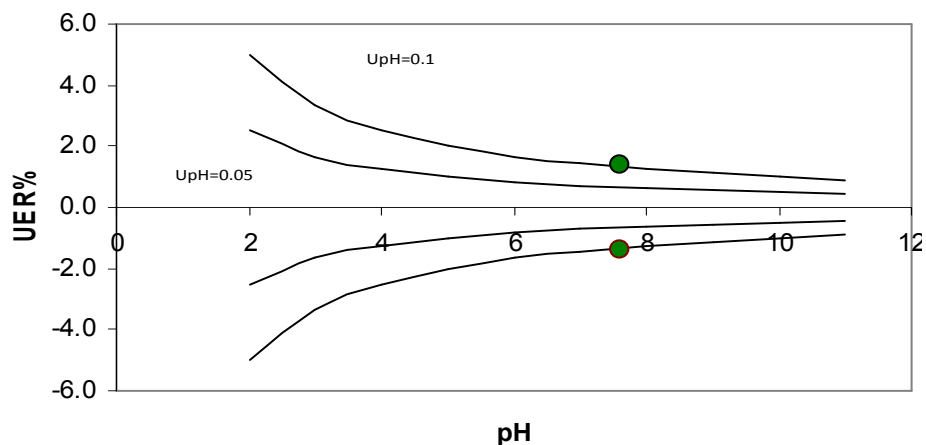


Figura 5. Incertidumbre expandida relativa UER% en las mediciones de pH obtenidas con dos electrodos de diferentes precisiones. Los círculos marcados representan los resultados experimentales del presente estudio ($UER\% \pm 1.41$).

Al evaluar el intervalo de confianza utilizando solamente la desviación estándar de repetibilidad y 8 grados de libertad se tiene:

$$pH_x \pm t_{0.975,8} S_x \quad (19)$$

$$7.71 \pm (2.31)(0.03)$$

$$7.71 \pm 0.07$$

Si se comparan los dos intervalos (18) y (19), se observa que no existen diferencias significativas, lo que confirma la calidad en las mediciones del pH en la muestra de agua. Sin embargo, el método riguroso utilizado en este estudio demuestra que no solamente la repetibilidad influye en la incertidumbre, si no que existen otros parámetros experimentales que deben ser tomados en cuenta en el cálculo. El parámetro que más influye en esta evaluación, es el pH, donde el potencial es nulo (upH_0) a la temperatura de calibración (25 °C).

5. CONCLUSIONES

La metodología desarrollada en el presente trabajo, estableció un procedimiento riguroso para evaluar la incertidumbre en la medición del pH en una muestra de agua, basándose en la guía GUM ISO 1995. En primer lugar se dedujo el modelo matemático, partiendo de la definición de pH operacional y evaluando los valores de pH donde el potencial es independiente de la temperatura (pH_{iso}) y donde el potencial es nulo a la temperatura de calibración a 25°C (pH_0).

Seguidamente, se identificaron las fuentes de incertidumbres, a través del diagrama causa-efecto y se evaluaron cada una de los componentes de las incertidumbres, aplicando la ley de la propagación de la incertidumbre.

Por último, se aplicó el modelo matemático para determinar el pH en una muestra de agua de la red de distribución urbana y se estimó el intervalo de confianza utilizando la distribución t para 18 grados de libertad efectivos y 95% de nivel de confianza. La incertidumbre expandida relativa al pH_x UER% es de 1.41, lo que representa un valor experimental aceptable en el presente trabajo.

Un aspecto a destacar es que, de acuerdo al Diagrama de Pareto representado en la figura 4, los parámetros que contribuyen en más del 90 por ciento a la incertidumbre total de la medición de pH_x , son el pH_0 de calibración y el potencial E_x medido en la muestra de agua. De estos dos parámetros experimentales, el primero tiene mayor influencia; esto significa que si se reduce la incertidumbre en pH_0 , se puede obtener una mejor precisión en la estimación del pH_x .

Para ello es necesario utilizar un mayor número de soluciones de referencia en una gama de pH entre 2 y 10 para la calibración a 25°C. En el presente estudio se utilizaron solamente tres soluciones de referencia (pH 4.00, 7.00 y 10.00) trazables a los estándares primarios del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología de los Estados Unidos (NIST).

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Delgado, M., Vanegas, M. y Delgado G. (2007), "Metrología Química I: Calibración de un pHmetro y control de calidad", UNIVERSITAS, Número 1, vol 1, pag.14-23, León, Nicaragua.
2. Westcott, C., (1978), pH Measurements, N.Y, Academic Press, p.172.

3. Clesceri, L., Greenberg, A. y Eaton, A., (1998), *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, N.Y., American Publishing Health Association, 20th edition, p. 2-24, 2-26.
4. Midgley, D. and Torrance, K., (1978), *Potentiometric Water Analysis*, N.Y., John Wiley, p. 135, 147.
5. ISO/IEC 17025(ES), (2005), "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración", Norma Internacional, Ginebra, Segunda Edición.
6. ISO/IEC 17011(ES), (2004), "Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad", Norma Internacional, Ginebra.
7. Bievre, P. (2006), "On quality of a measurement result", *Accred. Qual. Assur*, 11, 597-598.
8. Eurachem/Citac Guide, (2003), "Traceability in Chemical Measurement", Guía de Referencia, 1ra. Edición, UK.
9. Kimothi, S.K., (2000), *The Uncertainty of Measurements*, ASQ Quality Press, Wisconsin , pag. 391.
10. a) Leito, I., Strauss, L., Koort, E, y Phil, V.,(2000) *Accred. Qual. Assur.* 7 (2000) 242-249; b) KOORT, E., (2006), "Estimation of potentiometrically measured pH, and pKa Values" (Tesis doctoral), Tartu University PRESS, Estonia.
11. Aguiar R. et al., (2004), *Guía Técnica sobre Trazabilidad e Incertidumbre en las Mediciones Analíticas que Emplean la Técnica de Medición de pH*, CENAM/ema, México.
12. BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, OIML, (1995) *Guide for to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*, ISO, Ginebra.
13. Eurachem/Citac GUIDE, (2000), *Quantifying Uncertainty in Analytical Chemistry*, 2da edición, UK.
14. Philips S.D., Eberthardt KR, y Parry B, (1993) "Guidelines for expressing the uncertainty of measurement results containing uncorrected bias". *Journal of Research of National Institute of Standards and Technology*, 102, 5, 577-585
15. IZASA , (1998), "Trazabilidad en la medida de pH". *Industria Farmacéutica Analítica y Biotecnología*, 13, 49-51.
16. Strobel, H., (1989), *Chemical Instrumentation*, 3ª edición, John Wiley, NY, pag 1030.
17. IUPAC (1998), *Compendium of Analytical Nomenclature*, 3ª edición, Oxford, pag 3-11
18. Dean J. (1979) *Lange's Handbook of chemistry*, 12ª edición, McGraw Hill, N.Y.
19. Bates, R. G., (1963), *Determination of pH*, 2da. Edición, John Wiley, NY. Pag 365.
20. Skoog, D. A., Holler, F. J. y Nieman, T. A., (2005), *Análisis Instrumental*, Madrid, 5ta. Edición, McGraw Hill, p.650.
21. Riley T. y Tomlinson, C. (1987), *Principles of Electroanalytical Methods*, John Wiley, London, pag. 57.
22. Wodsworth, H. M., Stephens, K. y Godfrey, A. B., (2005), *Métodos de Control de Calidad*, México, Compañía Editorial Continental, 1ra. Edición, p. 359.
23. Mathias, O., (1999), *Chemometrics*, Weinhein, Alemania, Wiley-VCH, p. 186.

7. ANEXO

Derivación de la ley de propagación de la incertidumbre

Sea la función $Y = f(x)$

Por la expansión de Taylor, despreciando las derivadas mayores de 2º orden, se tiene:

$$Y = \frac{f(x')(x - x')}{0!} + \frac{f'(x')(x - x')}{1!} + \dots$$

Si hay más de una variable la función Y se convierte en:

$$Y = f(x', z') + f'(x')(x - x') + f'(z')(z - z')$$

La esperanza estadística es:

$$\begin{aligned} E(y - f(x', z'))^2 &= E(f'(x')(x - x') + f'(z')(z - z'))^2 \\ E(y - f(x', y'))^2 &= E(f''(x')(x - x') + 2f'(x')f'(z') + f'(z')^2(z - z')^2) \\ E(y - f(x', z'))^2 &= E[f''(x')(x - x')^2 + f''(z')(z - z')^2 + 2f'(x')f'(z')(x - x')(z - z')] \end{aligned}$$

Sustituyendo los términos de la esperanza estadística, $(x - x')^2$ y $(z - z')^2$ se transforman en incertidumbres al cuadrado (u_i^2), y tomando f' como las derivadas parciales de la función Y con respecto a x o z la ecuación se transforma a:

$$u_{(y)}^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 u_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 u_z^2 + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)u_{(x,z)}$$

La anterior ecuación se puede generalizar y se convierte en la ecuación que representa la ley de propagación de la incertidumbre:

$$u_{(y)}^2 = \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)u_{(x_i, x_j)}$$

Donde las derivadas parciales se denominan coeficientes de sensibilidad c_{xi} y el segundo término se conoce como la covarianza para variables correlacionadas. $u_{(x_i, x_j)}$ se puede evaluar por las incertidumbres de x_i , x_j y el índice de correlación de estas variables, utilizando la ecuación siguiente:

$$u_{(x_i, x_j)} = u_{x_i} u_{x_j} r_{(x_i, x_j)}$$

En el caso específico de los coeficientes del modelo de regresión, el intercepto y la pendiente tienen una correlación negativa^[12]. En el caso del modelo de calibración del presente estudio el índice de correlación se calcula según la siguiente fórmula:

$$r(b_0 b_1) = - \frac{\sum w_i p H_i}{\left[\sum w_i \sum w_i p H_i^2 \right]^{1/2}}$$

Donde w_i es el factor de ponderación, el cual es inversamente proporcional a la varianza del potencial correspondiente.